



MultiEquipment. Ref F336A

Manual de instrucciones

Microdermoabrasión con microcristales

Advertencia

- Nunca, en ninguna circunstancia, intente abrir o inspeccionar los componentes o accesorios internos de la máquina. Si fuera necesaria una inspección, por favor póngase en contacto con su proveedor o un técnico debidamente cualificado.
- No utilice nunca la unidad en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados, como zonas de baño, baños, etc., con el fin de prevenir daños en los componentes eléctricos de su equipo.
- Nunca utilice el equipo al aire libre, las inclemencias meteorológicas pueden causar daños.
- Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o contacte con el proveedor.

Reciclaje



Cuando aparezca este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, esto significa que dichos productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

Declaración de conformidad CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

1. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2014/35/EU
2. Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2014/30/EU

¡Bienvenido!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un manejo incorrecto.

La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.




weelko
the wellness
company

Importador/Importer
Importateur/Importeur
Importatore:

Weelko Barcelona, S.L.
ESB65397556

Barcelona
Pol. Ind. La Vall dan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 938 24 90 20
E. info@weelko.com
W. www.weelko.com


Panel frontal

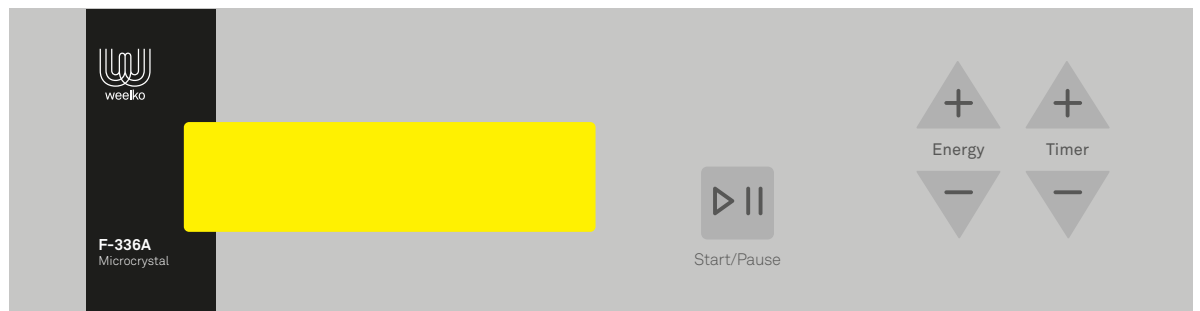

Instrucciones de uso

1. Conecte el cable de alimentación en el panel trasero.
2. Encender el instrumento mediante el botón "POWER".
3. Pulse la tecla "FUNCTION" para seleccionar la función deseada en el siguiente orden:
microdermoabrasión con microcristales,
microdermoabrasión con puntas de diamante.

Recipientes para micro cristales:

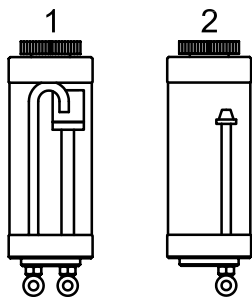


1. Recipiente para micro cristales usados.
2. Recipiente para micro cristales nuevos.

MICRODERMOABRASIÓN CON MICROCRISTALES


Instrucciones de uso

1. Montar el porta manípulos de plástico en un lateral del aparato.
2. Conecte correctamente los tubos según se muestra en el esquema. Para conectarlos en el terminal del aparato y en los recipientes, es suficiente con introducirlo y ejercer una ligera presión. Para retirarlos, presionar la parte de plástico de la conexión y tirar del tubo sin forzarlo.

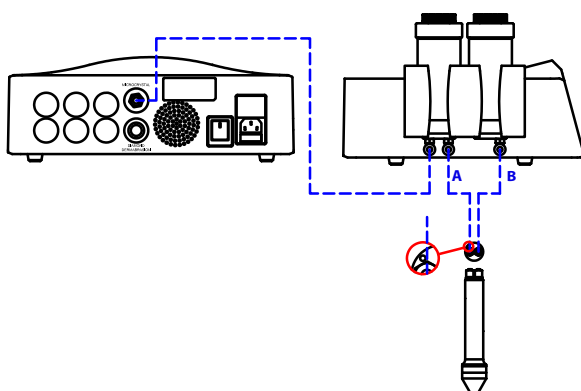

3. Rellene con micro cristales el recipiente nº 2 sin superar la línea indicada. La zona de roscado del tapón debe quedar completamente limpia de micro cristales. Se recomienda utilizar micro cristales de tamaño de partícula #120.

Nota importante: no manipular los micro cristales con las manos.

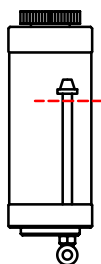

4. Ajustar la potencia y el tiempo de trabajo mediante los botones "ENERGY" y "TIMER" respectivamente. La potencia de salida por defecto es 1 (ajustable de 1 a 10) y el tiempo de trabajo predeterminado son 15 minutos (ajustable de 0 a 60 minutos)

5. Pulsar "START/PAUSE" para empezar con el tratamiento. En este momento, el display dinámico indica que el equipo está en funcionamiento. La operación se puede detener y reanudar pulsando este mismo botón.

6. Cuando el tiempo de operación haya finalizado, el aparato emitirá un zumbido y la función seleccionada se detendrá quedando el aparato en modo espera.

7. Una vez finalizado el tratamiento, el recipiente nº 1 se habrá llenado de los micro cristales utilizados y el recipiente nº 2 se habrá vaciado. Retirar los micro cristales utilizados y desecharlos y rellenar el recipiente nº 1 para futuros tratamientos. La zona de roscado del tapón debe quedar completamente limpia de micro cristales.

Nota importante: no manipular los micro cristales con las manos.

Notas

- Durante el tratamiento, mantener siempre el manípulo por debajo del nivel del equipo. No trabajar con el manípulo por encima del equipo.
- El contacto con la piel debe durar entre 3 y 5 segundos. Transcurrido este tiempo, levantar el manípulo y aplicarlo en otra parte de la zona a tratar.


Precauciones

- Limpiar la piel y secarla. No es necesario aplicar ningún tipo de loción para realizar el tratamiento.
- Cubrir los ojos durante el tratamiento para evitar que entren microcristales en los ojos.
- Durante el tratamiento en la zona de los ojos, ajustar el nivel de energía entre 1 y 5. Será suficiente aplicar sólo dos veces el cabezal en esta zona.
- Evitar la exposición solar durante las 24 horas posteriores al tratamiento.
- No utilizar maquillaje durante las 4 horas posteriores al tratamiento.
- No realizar sesiones de sauna durante los 10 días posteriores al tratamiento.
- Después de realizar el tratamiento, utilizar productos neutros para rehidratar la piel en lugar de productos ácidos.

FAQ

Si el dispositivo produce un ruido anormal:

- Retirar los 4 tornillos que se indican a continuación. Estos tornillos tienen la finalidad de sujetar la bomba durante el transporte del equipo. Puede ser que interrumpen la correcta vibración de la bomba durante el funcionamiento y por ese motivo se incrementa el ruido del aparato.

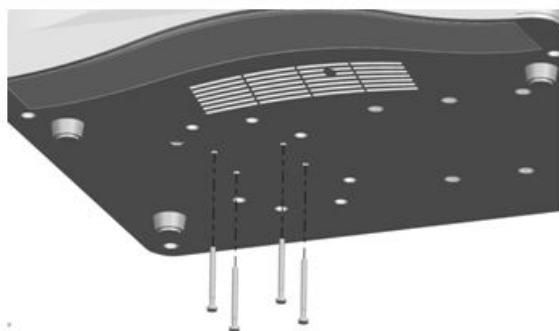

MANTENIMIENTO

- El filtro en el recipiente nº 1 impide que los micro cristales penetren en el circuito de succión del equipo. Se entregan 4 filtros de recambio. Para sustituir dicho filtro desenroscar el soporte del tapón del recipiente, retirar el filtro usado, colocar el filtro nuevo y volver a enroscar el soporte del tapón.
- Limpie y desinfecte el cabezal y el manipulador después de cada tratamiento. Se recomienda sumergirlos primeramente en un esterilizador por ultrasonidos y posteriormente en un esterilizador ultravioleta.



MultiEquipment. Ref F336A

Instruction manual

Micro-crystal dermabrasion

Warning

- Never under any circumstances attempt to open or inspect the internal components or accessories of the machine. If an inspection becomes necessary, please contact your supplier or a suitably competent technician.
- Never use the unit in humid or poorly ventilated environments, such as wet rooms, bathrooms etc. to prevent damage to the electrical components of your unit.
- Never use the unit outdoors; exposure to the elements can cause damage.
- If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards, or contact the dealer for service.

Recycling



Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that these products should not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper treatment of this waste, dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of electrical equipment. This initiative will help preserve save natural resources and improve standards of environmental protection in regard to the treatment of electrical waste.

EC-Declaration of compliance


This product meets the following requirements:

1. Conditions set out in the Low Voltage Directive: 2014/35/EU
2. Conditions set out in the Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/30/EU

Welcome!

Thank you very much for purchase. Please read the instructions carefully before operating the instrument. You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the instrument correctly. We will accept no responsibility for any accidents that occur due to incorrect operation.

The company reserves the right to amend the details of the instruments with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail informing us so that we can correct them.

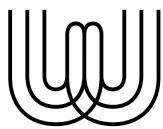


weelko
the wellness
company

Importador/Importer
Importateur/Importeur
Importatore:

Weelko Barcelona, S.L.
ESB65397556

Barcelona
Pol. Ind. La Vall d'an
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 938 24 90 20
E. info@weelko.com
W. www.weelko.com


Front panel

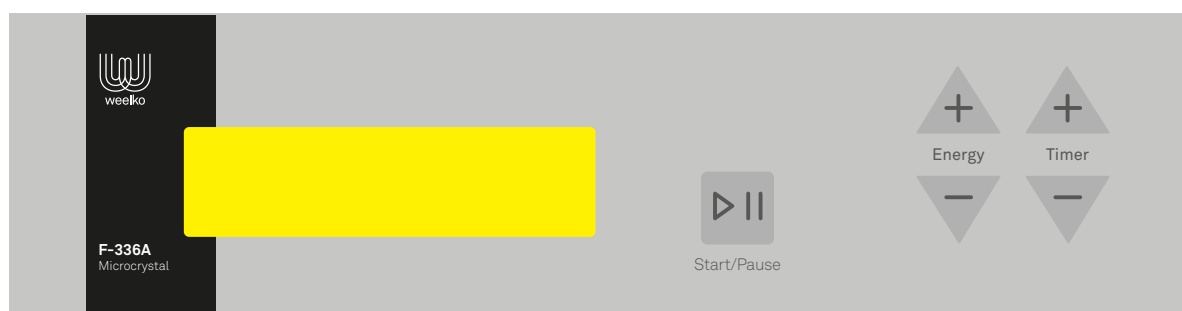

Instructions of use

1. Connect the power supply via the rear panel.
2. Turn on the "POWER" button.
3. Press "FUNCTION" to select the desired function in the following order: micro-crystal dermabrasion, diamond dermabrasion.

Micro-crystal containers:

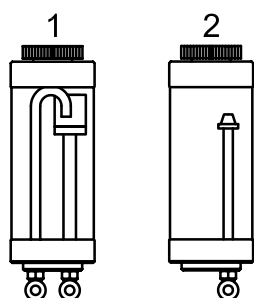


1. Used micro-crystal container.
2. New micro-crystal container.

MICRO-CRYSTAL DERMABRASION


Instructions of use

1. Assembly the plastic handle holder in on side of the device.
2. Properly plug the pipes as shown in the sketch below. Plug them in the device socket and in the containers, it's enough by introducing it and do gentle pressure. To withdraw the pipes, press the round plastic part in the plug and pull the pipe without forcing.

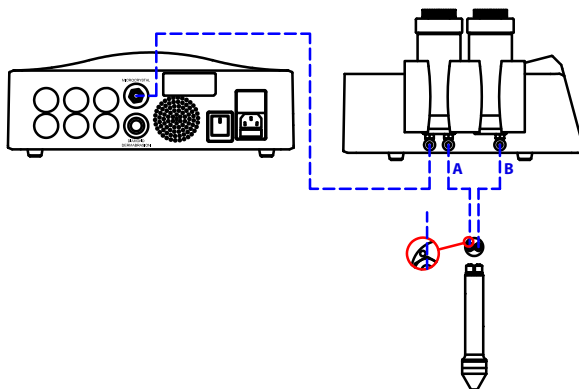

3. Fill with micro-crystal the container #2 without exceeding the line. The cap thread must be completely clean of micro-crystal. Is recommended to use #120 particle size micro-crystal.

Important note: is prohibited manipulate micro-crystal with hands.

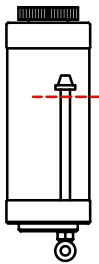

4. Select the desire power output and time of working by pressing “ENERGY” and “TIMER” respectively. “ENERGY” can be adjusted between 1 and 10. “TIMER” can be adjusted between 1 and 60 minutes.

5. Press “START/PAUSE” button to start. The handle showed in the display will the machine is working normally. The operation can be paused and restart by pressing this button.

6. Once the operation time has finished, the device will emit a “beep” and the selected function will stop. The device is now in standby mode.

7. Once the treatment has finished, the used micro-crystal have been deposited in the container #1. The container #2 is empty. Remove and discard the used micro-crystal. Fill the container #2 for future treatments. The cap thread must be completely clean of micro-crystal.

Important note: is prohibited manipulate micro-crystal with hands.

Notes

- During the treatment, always keep the handle under the device level. Do not work with the handle over the device level.
- The direct contact to the skin is 3–5 seconds only. After this time, lift the handle and apply it to another part of the treatment area.


Cautions

- Clean and dry skin. No need to apply lotion for treatment.
- During the operation on the eyes, please adjust the air pressure about 1-5 , and it will be enough after gently hand over twice.
- Avoid sun exposure for 24 hours after treatment.
- Do not use makeup for 4 hours after treatment.
- Do not make sauna sessions during the 10 days after treatment.
- After treatment, use neutral products to moisturize the skin rather than acidic.

FAQ

If the device produces an abnormal sound:

- Remove the 4 screws indicated below. These screws are intended to fasten the pump during transport of the equipment. It might disrupt the correct pump vibration during operation and for that reason will increase the noise of the device.

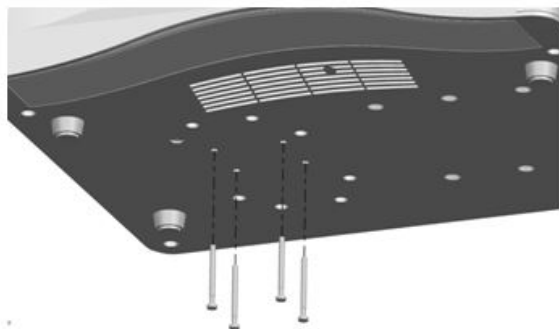

MAINTENANCE

- The filter in container #1 prevents micro crystals entering the suction circuit of the equipment. 4 replacement filters are delivered. To replace the filter, unscrew the cap of the container stand, remove the old filter, insert the new filter and screw the cap holder.
- Clean and disinfect the handle and after each treatment. It is recommended to dip first ultrasonic sterilizer and subsequently in an ultraviolet sterilizer.



MultiEquipment. Ref F336A

Mode d'emploi

Microdermabrasion
avec des microcristaux
en aluminium

Advertissement

- N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contacter votre fournisseur ou un technicien qualifié.
- N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains); ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil.
- N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.

Recyclage

Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels. Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

Déclaration de conformité CE

Ce produit répond aux exigences suivantes:

1. Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2014/35/EU
2. Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2014/30/EU

Bienvenue!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.

L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.




weelko
the wellness
company

Importador/Importer
Importateur/Importeur
Importatore:

Weelko Barcelona, S.L.
ESB65397556

Barcelona
Pol. Ind. La Vall d'Al
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 938 24 90 20
E. info@weelko.com
W. www.weelko.com


Panneau avant

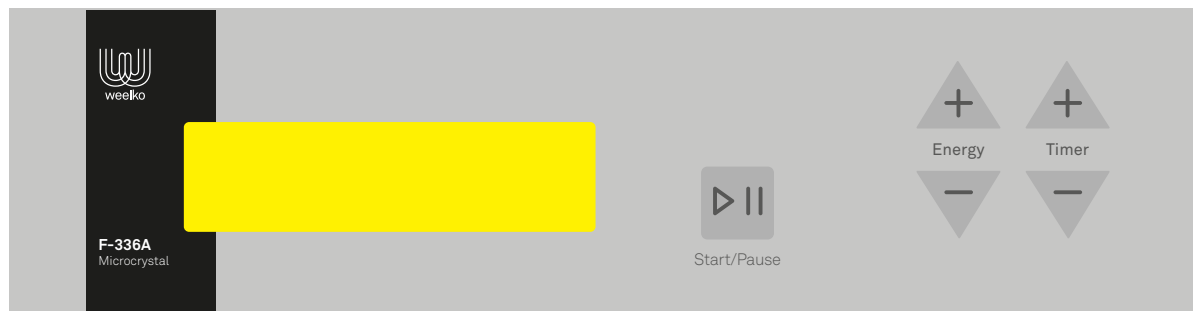

Mode d'emploi

1. Branchez le cordon d'alimentation arrière du panneau.
2. Allumez l'appareil en appuyant sur "POWER".
3. Appuyez sur "SELECT" pour sélectionner la fonction désirée.

Réipients pour les microcristaux:

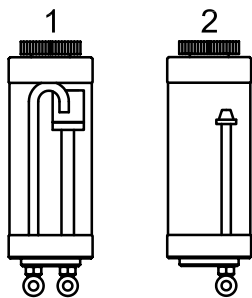


1. Réipient pour les microcristaux utilisés.
2. Réipient pour les nouveaux microcristaux.

MICRODERMABRASION PAR MICROCRISTAUX EN ALUMINIUM


Mode d'emploi

1. Montez les supports latéraux de la pièce à main.
2. Raccordez les tuyaux d'air dans les bouteilles comme montre le croquis.

Pour les connecter à la borne de l'appareil et aux récipients, il faut que l'introduire et appuyer légèrement. Pour les enlever, il faut appuyer la partie en plastique de la connexion et étirer le tuyau sans le forcer.

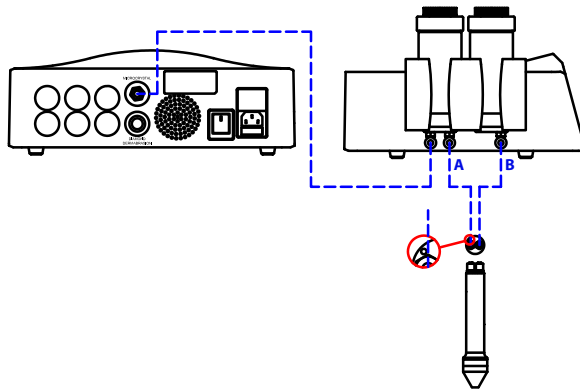

3. Ouvrez le flacon "2" et le remplissez avec des microcristaux sans dépasser la limite montrée sur le croquis.

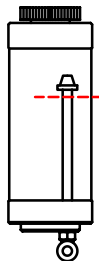

4. Bien fermer la bouteille. La zone de filetage du bouchon doit rester complètement propre de microcristaux. Il faudrait utiliser microcristaux de taille de particule #120.

Note importante: ne manipuler pas les microcristaux avec les mains.

5. Ajustez les options « TIMER » et « ENERGY » selon vos souhaits.

6. Appuyez sur le bouton « START/STOP » pour commencer le traitement.

7. Une fois le traitement soit finalisé, le récipient numéro 1 sera plein de microcristaux utilisés et le récipient numéro 2 sera vide. Enlever les microcristaux utilisés et les jeter et remplir le récipient numéro 2 pour des prochains traitements. La zone de filetage doit rester complètement propre de microcristaux.

Note importante: ne manipuler pas les microcristaux avec les mains.

Notes

- La poignée doit être en contact avec la peau seulement de 3 à 5 secondes.


Cautions

- Nettoyez la peau, séchez l'excès d'eau dans le visage et puis vous pouvez commencer le traitement.
- Il n'est pas nécessaire d'appliquer émulsions ou lotions supplémentaires.
- Pendant le traitement vers les yeux, veuillez ajuster la pression d'air entre 1 -5, et il suffira de traverser cette zone deux fois.
- Pendant le fonctionnement dans la zone T, une région qui généralement a une épaisse cuticule, vous pouvez utiliser la grosse tête pour la dermabrasion et la pression d'air peut être augmentée en conséquence.
- Après les traitements, nettoyer le visage à nouveau avec de l'eau et appliquer ensuite le traitement nutritionnel souhaité.

FAQ

Si la pompe fait un bruit inhabituel:

- Enlever les 4 vis de fixation de la pompe au fond de l'appareil. Ces vis ont la fonction de maintenir la pompe pendant le transport pour éviter que celle-ci puisse s'abîmer. Il peut arriver que, pendant le fonctionnement, ces vis empêchent la vibration correcte de la pompe et pour cette raison, cela augmente le niveau de bruit.

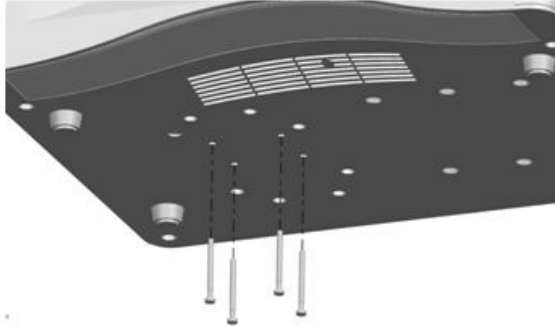

MAINTENANCE

- Ne pas utiliser l'appareil si le tuyau filtrant relié à l'appareil n'est pas installé. Ce filtre doit être remplacé pour chaque des 5 traitements.
- Pour remplacer le filtre:
 - Dévissez le bouchon du réservoir.
 - Retirez le filtre en tirant et insérer le nouveau.
 - Vissez la partie supérieure du réservoir, en s'assurant que le joint en silicone soit correctement placé.

Remarque: Avant de visser le haut, essuyez toute trace de microcristaux dans le filetage et le joint en silicone afin de garantir leur étanchéité.

4 filtres de remplacement sont fournis.

- Après le traitement, s'il vous plaît utiliser de l'eau distillée et une brosse pour nettoyer les accessoires. Puis trempez-les complètement dans le récipient pour désinfecter avec une solution d'alcool 75% pendant 15 minutes. Puis les retirer, les nettoyer et puis les mettre dans le stérilisateur UV pour être prêts pour la prochaine utilisation.



MultiEquipment. Ref F336A

Bedienungsanleitung

Mikrokristallen Microdermabrasionsgerät

Warnung

- Versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen und die innen liegenden Komponenten oder Zubehör zu untersuchen. Wenn eine Kontrolle notwendig wird, setzen Sie sich dafür mit Ihrem Lieferanten oder einem kompetenten Techniker in Verbindung.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in feuchter oder unbelüfteter Umgebung, wie z.B. Feuchträume oder Badezimmer, um Schaden an den elektrischen Komponenten Ihres Geräts zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien, Witterungseinflüsse können Schäden verursachen.
- Wenn die elektrische Zuleitung beschädigt ist, lassen Sie diese von einem Fachmann kontrollieren und austauschen, um Risiken zu vermeiden, oder bitten Sie den Händler um Kundendienstleistungen.

Recycling



Dieses Symbol auf unseren elektrischen Geräten und auf ihren Verpackungen bedeutet, dass diese Produkte in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für die Entsorgung beachten Sie bitte die lokalen Vorschriften oder die Anforderungen für die Entsorgung von elektrischen Geräten. Diese Initiative zur Entsorgung von Elektromüll hilft die natürlichen Ressourcen zu erhalten und dient einem besseren Umweltschutz.

EC Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen:

1. Die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU
2. Die Vorschriften der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit: 2014/30/EU

Willkommen!

Vielen Dank für Ihren Kauf! Bitte lesen Sie die Anleitungen gründlich durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie können auch Ihren Fachbetrieb um eine Einweisung bitten, damit Sie sicher sind, dass Sie das Gerät richtig einsetzen. Wir haften nicht für Unfälle, die aufgrund fehlerhafter Bedienung entstehen.

Der Hersteller behält sich technische Änderungen der Geräte ohne vorherige Ankündigung vor. Wenn Sie in diesen Anleitungen Fehler finden, bitte senden Sie uns eine E-Mail, damit wir diese berichtigen können.



weelko
the wellness
company


Importador/Importer
Importateur/Importeur
Importatore:

Weelko Barcelona, S.L.
ESB65397556

Barcelona
Pol. Ind. La Vall d'Al
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 938 24 90 20
E. info@weelko.com
W. www.weelko.com

© 2018 Weelko
Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen www.weelko.com
Importeur: Weelko Barcelona, S.L.
ESB65397556


SCHALTТАFEL

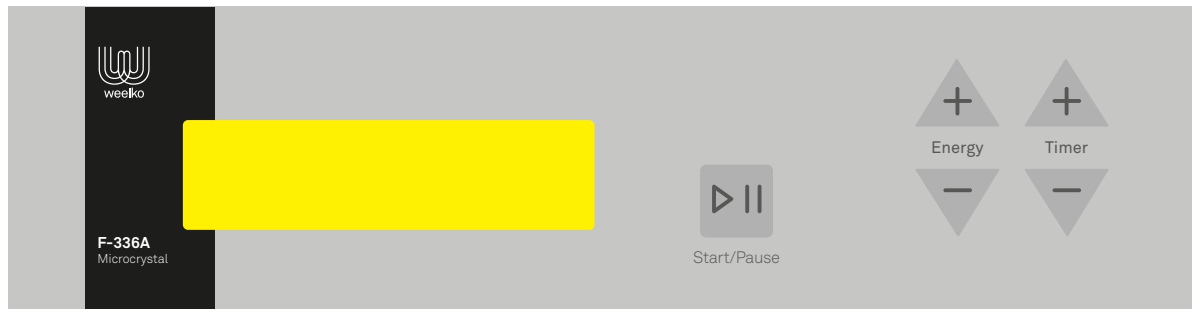

Gebrauchs

1. Stecken Sie das Stromkabel an der Geräterückseite ein.
2. Drücken Sie die Taste "POWER"
3. Drücken Sie die Taste "SELECT" um die gewünschte Funktion zu wählen. Folgende Reihenfolge ist einzuhalten: Mikrodermabrasion mit Mikrokristallen aus Aluminium und Mikrodermabrasion mit Diamant-aufsätzen.

Behälter für Mikrokristallen:

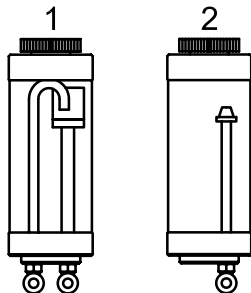


1. Behälter für bereits benutzte Kristallen
2. Behälter für neue Kristallen

MIKROKRISTALLEN MICRODERMABRASIONSGERÄT


Gebrauchs

1. Montieren Sie die seitlichen Halterungen für die Behandlungsgeräte.
2. Schließen die Luftschläuche an die Flaschen an, wie in der Abbildung dargestellt. Um die Schlauche sowohl bei den Behältern als auch im Gerät richtig zu verbinden, müssen Sie sie nur reinstecken und ein bisschen Druck ausüben. Wenn Sie die Schlauche abmachen möchten, drücken Sie an den Plastikteil von der Verbindung und ziehen Sie vorsichtig daran.

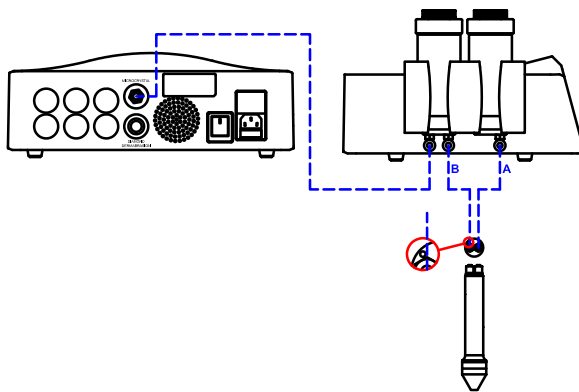

3. Öffnen Sie die "A" Flasche und füllen Sie das Mikrokristall ein, ohne die in der Abbildung dargestellt Obergrenze zu übersteigen. Vergewissern Sie sich, dass keine Kristallen am Gewindebereich bleiben. Es wird empfohlen Kristallen mit Teilchengröße #120 zu benutzen.

Wichtiger Hinweis: Manipulieren Sie die Kristallen nicht mit den Händen.

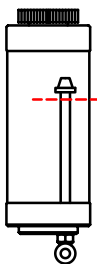

4. Stellen Sie die Ausgangsleistung mit "ENERGY" auf den gewünschten Pegel ein (von 1 bis 10). Wählen Sie die Dauer der Behandlung mit der Taste „TIMER“ (Standard 15 Minuten aber von 0 auf 60 Minuten einstellbar).

5. Drücken Sie "START/PAUSE" um mit der Behandlung anzufangen. Auf dem dynamischen Display wird es abgebildet, wenn das Gerät arbeitet. Sie können auch auf "START/PAUSE" drücken, um die Behandlung anzuhalten und wieder zu starten.

6. Wenn die Zeit der Behandlung um ist, das Gerät wird piepsen und die Funktion wird stoppen. Das Gerät bleibt in Wartemodus.

7. Wenn Sie die Behandlung beendet haben, der Behälter 1 wird voll mit benutzen Mikrokristallen sein und der Behälter 2 wird leer sein. Entleeren Sie den Behälter mit den benutzen Mikrokristallen und füllen Sie Behälter Nummer 1 wieder mit neuen Mikrokristallen auf für die nächste Behandlung. Vergewissern Sie sich, dass der Gewindebereich ohne Kristallen bleibt.

Wichtiger Hinweis: Manipulieren Sie die Kristallen nicht mit den Händen.

Hinweise

- Während der Behandlung, halten Sie immer den Handstück unter das Niveau von dem Gerät. Arbeiten Sie nicht mit dem Handstück über die Höhe des Gerätes.
- Der Griff darf nicht länger als 3-5 Sekunden mit der Haut in Kontakt sein.


Vorsichtsmaßnahmen

- Reinigen Sie die Haut, tupfen Sie überschüssiges Wasser vom Gesicht ab und Sie können mit der Behandlung beginnen. Weitere Lotionen oder Emulsionen sind nicht erforderlich.
- Bitte schließen Sie beim Betrieb die Augen damit keine Kristalle in Ihre Augen geraten.
- Während der Behandlung werden Sie ein leichtes Kribbeln verspüren. Sollte es sich um eine tiefere oder größere Wunde handeln, die ein stärkeres oder tieferes Peeling erforderlich macht, müssen Sie gegebenenfalls eine schmerzlindernde Creme topisch anwenden.
- Stellen Sie für die Behandlung an den Augen den Luftdruck zwischen 1-5 ein. Damit werden zwei sanfte Durchgänge ausreichend sein.
- Vermeiden sie die Sonne 24 Stunden nach der Behandlung.
- Vermeiden Sie Make up die erste 4 Stunden nach der Behandlung.
- Vermeiden Sie Saunagänge die erste 10 Tage nach der Behandlung.
- Reinigen Sie nach den Behandlungen die Haut nochmals mit sauberem Wasser und tragen Sie dann die Pflegeprodukte auf.

FAQ

Sollte die Ansaugpumpe ungewöhnliche Geräusche machen:

- Entfernen Sie die 4 Schrauben, mit denen die Pumpe am unteren Bereich des Gerätes befestigt ist. Diese Schrauben fixieren die Pumpe, damit sie während des Transports nicht beschädigt wird. Es kann vorkommen, dass bei Betrieb diese Schrauben verhindern, dass die Pumpe richtig vibrieren kann und deshalb der Lärmpegel ansteigt.

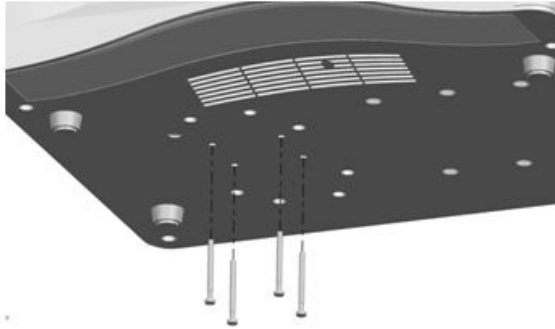

WARTUNG

- Dieser Filter muss nach jeweils 5 Behandlungen ausgetauscht werden.

- Filterwechsel:

- Schrauben Sie den oberen Bereich des Tanks auf.
- Ziehen Sie am Filter um ihn zu entfernen und legen Sie einen neuen ein.
- Schrauben Sie den oberen Bereich des Tanks zu und vergewissern Sie sich, dass die Silikondichtung richtig eingesetzt ist.

Hinweis: Bevor Sie den oberen Bereich des Tanks zuschrauben, entfernen Sie bitte mögliche Rückstände von Mikrokristallen am Gewinde und an der Silikondichtung, um den Verlust von Dichtigkeit zu vermeiden.

4 Ersatzfilter sind im Lieferumfang enthalten.

- Der Filter im Behälter 1 verhindert, dass die Mikrokristalle in den Saugkreis vom Gerät reinkommen. Im Lieferumfang bekommen Sie 4 Filter. Um den Filter auszutauschen, schrauben Sie den Deckel von dem Behälter, legen Sie das alte Filter weg, legen Sie den neuen Filter und schrauben Sie den Behälter zu.

- Desinfektionsmethode:

- Verwenden Sie nach der Behandlung bitte destilliertes Wasser und eine Bürste, um die Zubehörteile zu reinigen, tauchen Sie sie im Anschluss vollständig in den Container ein, um sie in der 75%igen Alkohollösung 15 Minuten lang zu desinfizieren. Im Anschluss entnehmen Sie sie bitte, reinigen sie und legen sie in den UV Sterilisator für den nächsten Gebrauch.



MultiEquipment. Ref F336A

Manuale d'istruzioni

Microdermoabrasione con microcristalli

Avvertenze

- Non cercare mai di aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni all'apparecchiatura. Qualora dovesse essere necessaria un'ispezione, mettersi in contatto con il fornitore o con un tecnico specializzato.
- Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, onde evitare di danneggiare gli elementi elettrici.
- Non utilizzare mai l'apparecchiatura all'aperto: gli agenti meteorologici potrebbero danneggiarla.
- Qualora il cavo elettrico dovesse essere rotto o danneggiato, chiederne uno in sostituzione al distributore onde evitare eventuali rischi.

Riciclaggio



Il seguente simbolo, se presente su uno degli apparati elettrici o nell'imballaggio, indica che tali prodotti non possono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un adeguato trattamento dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento delle apparecchiature elettriche. Tale procedimento è necessario per aiutare a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

Dichiarazione di conformità CE

Il presente prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

1. Le misure della Direttiva di bassa tensione:

2014/35/EU

2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EU

Benvenuti!

Grazie per aver effettuato l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il manuale d'istruzioni. È, inoltre, consigliato seguire le indicazioni di un professionista per assicurarsi di utilizzare l'apparecchio correttamente. L'Azienda declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti dovuti a un utilizzo non corretto dell'apparecchio.




weelko
the wellness
company

Importador/Importer
Importateur/Importeur
Importatore:

Weelko Barcelona, S.L.
ESB65397556


Barcelona
Pol. Ind. La Vall d'Al
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 938 24 90 20
E. info@weelko.com
W. www.weelko.com

Panello frontale

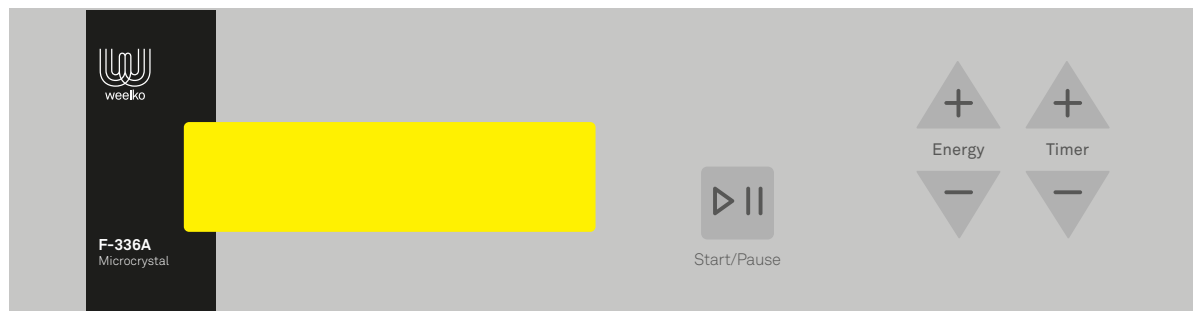

ISTRUZIONI D'USO

1. Connettere il cavo d'alimentazione nel pannello posteriore.
2. Accendere l'apparecchiatura tramite il tasto "POWER".
3. Montare il supporto porta-recipienti di plastica nel laterale dell'unità principale.
4. Collegare correttamente i tubi applicando una leggera pressione, come indicato nello schema sottostante.

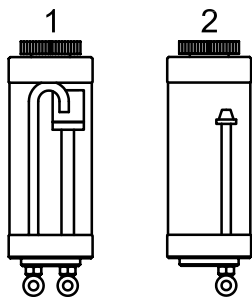


1. Contenitore di micro cristalli usati.
2. Contenitore di micro cristalli nuovi.

MICRODERMOABRASIONE CON MICRO CRISTALLI


Istruzioni d'uso

1. Fissare il supporto porta manipoli di plastica, lateralmente, sull'apparato.
2. Collegare correttamente i diversi tubi come indicato nello schema. Per collegarli al terminale dell'apparecchiatura e ai contenitori sarà sufficiente inserirli ed esercitare una leggera pressione. Per rimuoverli, premere la parte in plastica del collegamento e tirare fuori il tubo senza forzarlo.

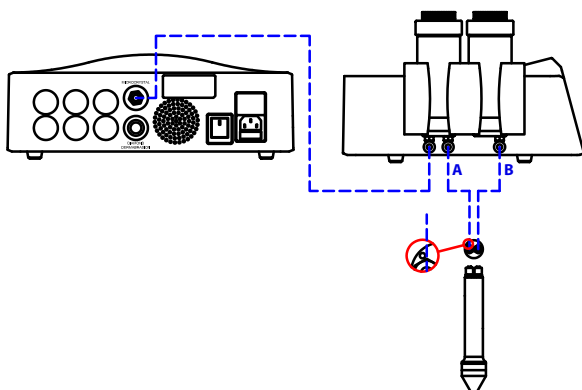

3. Riempire il contenitore n°2 con micro cristalli, facendo attenzione a non superare la linea indicata. La parte filettata del tappo deve essere completamente ripulita di micro cristalli; sono raccomandati i micro cristalli di granulometria 120.

Nota importante: Non manipolare i micro cristalli con le mani.

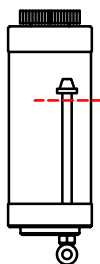

4. Regolare la potenza e la durata del trattamento tramite i tasti "ENERGY" e "TIMER", rispettivamente. La potenza d'uscita per difetto è 1 (regolabile 1-10) e la durata del trattamento predefinita è di 15 minuti (regolabile da 0-60 minuti).

5. Premere il tasto "START / PAUSE" per iniziare il trattamento. A questo punto il display dinamico indicherà che l'apparecchiatura è in funzione. L'operazione potrà essere interrotta e ripresa premendo lo stesso tasto.

6. Una volta terminato il tempo di durata del trattamento sarà emesso un segnale acustico, la funzione selezionata smetterà di funzionare e l'unità entrerà in modalità standby.

7. Finito il trattamento, il contenitore # 1 si sarà riempito di microcristalli usati ed il contenitore #2 sarà vuoto. Rimuovere e gettare i micro cristalli utilizzati e riempire il contenitore #2 per i trattamenti futuri. La parte del tappo filettata deve essere completamente pulita di microcristalli.

Nota importante: Non manipolare i micro cristalli con le mani.

Note

- Durante il trattamento tenere sempre il manipolo al di sotto dell'apparecchiatura: non lavorare mai reggendo il manipolo al di sopra dell'unità.
- Il contatto con la pelle dovrebbe durare tra 3 e 5 secondi. Una volta trascorso questo tempo, sollevare il manipolo ed applicarlo in un altro punto della zona da trattare.


Precauzioni

- Disinfettare ed asciugare la pelle. Non è necessario applicare alcuna lozione prima del trattamento.
- Coprire gli occhi durante il trattamento per evitare che posano entrarci micro cristalli.
- Durante il trattamento intorno alla zona degli occhi, regolare il livello di potenza tra 1 e 5. Basterà applicare il soffione in questa zona soltanto due volte.
- Evitare l'esposizione al sole nelle 24 ore successive al trattamento.
- Non usare trucco nelle quattro ore successive trattamento.
- Non sottoporsi a sessioni di sauna nei 10 giorni successivi al trattamento.
- Dopo aver completato il trattamento, utilizzare prodotti neutri per reidratare la pelle: evitare assolutamente prodotti acidi.

FAQ

Se il dispositivo produce un suono anormale:

- Rimuovere le 4 viti di seguito illustrate. Tali viti servono a fissare la pompa durante il trasporto dell'apparecchiatura. È possibile che siano esse ad interrompere la corretta vibrazione della pompa durante il funzionamento, portando l'apparecchio ad emettere un suono anormale.

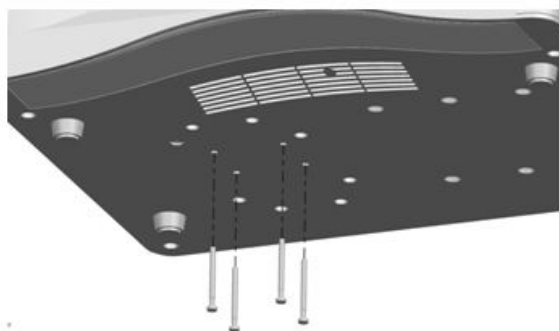

MANTENIMENTO

- Il filtro nel contenitore n°. 1 impedisce che i micro cristalli penetrino nel circuito di aspirazione dell'apparecchio. Vengono consegnati quattro filtri di ricambio. Per sostituire il filtro sarà necessario svitare il tappo del contenitore, rimuovere il vecchio filtro, inserire il nuovo filtro e riavvitare il tappo.
- Pulire e disinfettare la parte superiore del manipolo dopo ogni trattamento. È raccomandato immergerli prima in uno sterilizzatore ad ultrasuoni e poi in uno sterilizzatore UV.