



weelko

HighTech EMS WKB008



Electrostimulation



HighTech EMS WKB008



Electrostimulation

Equipo

- 10 electrodos grandes.
- 10 electrodos pequeños.
- 2 cables conectores con 10 salidas.
- 20 bandas elásticas con velcro.
- Unidad principal.

Nota: Los equipos vienen protegidos con un plástico adhesivo muy delgado, que protege la pantalla de posibles rayones durante el embalaje, y generalmente se marca, se puede retirar el mismo una vez desembalado.



HighTech Combi Fit WKB008



Electrostimulation

Equipo

Nuestro WKB008, es un equipo digital de belleza con pantalla táctil de electroestimulación. Con 20 electrodos para EMS, dos conectores y bandas elásticas para sujetarlos. Es Ideal para mejorar la tonicidad muscular, facilitar la eliminación de grasas y líquidos mediante la activación del drenaje linfático debido a la contracción muscular, oxigenación celular, fortalecimiento muscular y reeducación motora.

Para conectar el equipo correctamente, deberá hacerse en el panel trasero, que de izquierda a derecha irá de la siguiente forma:

- Conecte el cable de alimentación o suministro de energía (200-240V 50Hz).
- Conecte correctamente los cables con los dos conectores en el panel trasero de la electroestimulación, el primer conector para EMS 5-9 y el segundo conector para EMS 0-4. Es importante seguir las indicaciones numéricas (conector para EMS 5-9 y del 0-4).
- Para encender el equipo encontraremos un botón en el panel frontal, y luego hacemos clic en el logo Weelko de la pantalla para táctil para acceder a la función EMS.



HighTech Combi Fit WKB008



EMS


Mode: en la función de EMS, el menú "MODE" permite escoger la frecuencia de trabajo con electroestimulación con cuatro programas A, B, C, D.

Intensidad: se regula directamente en el número correspondiente a cada electrodo y va del 1 al 15. en el caso de los programas C y D la intensidad debe ser suficiente para la actividad funcional hasta la contracción visible.

Time: nos determina el tiempo de tratamiento, en el caso de utilizar los programas A y B el tiempo de tratamiento recomendado es de 45min., para tratamientos con los programas C y D el tiempo de tratamiento será de 20-30min. máx. recomendado.

Play y Pause: para comenzar a emitir o pausar el equipo cuando lo necesitemos.

Los electrodos se colocarán de la siguiente forma: el cable rojo será el polo positivo y este electrodo debe colocarse en el punto motor o vientre muscular. El cable negro será el polo negativo y se colocará en el electrodo cerca de la inserción muscular.

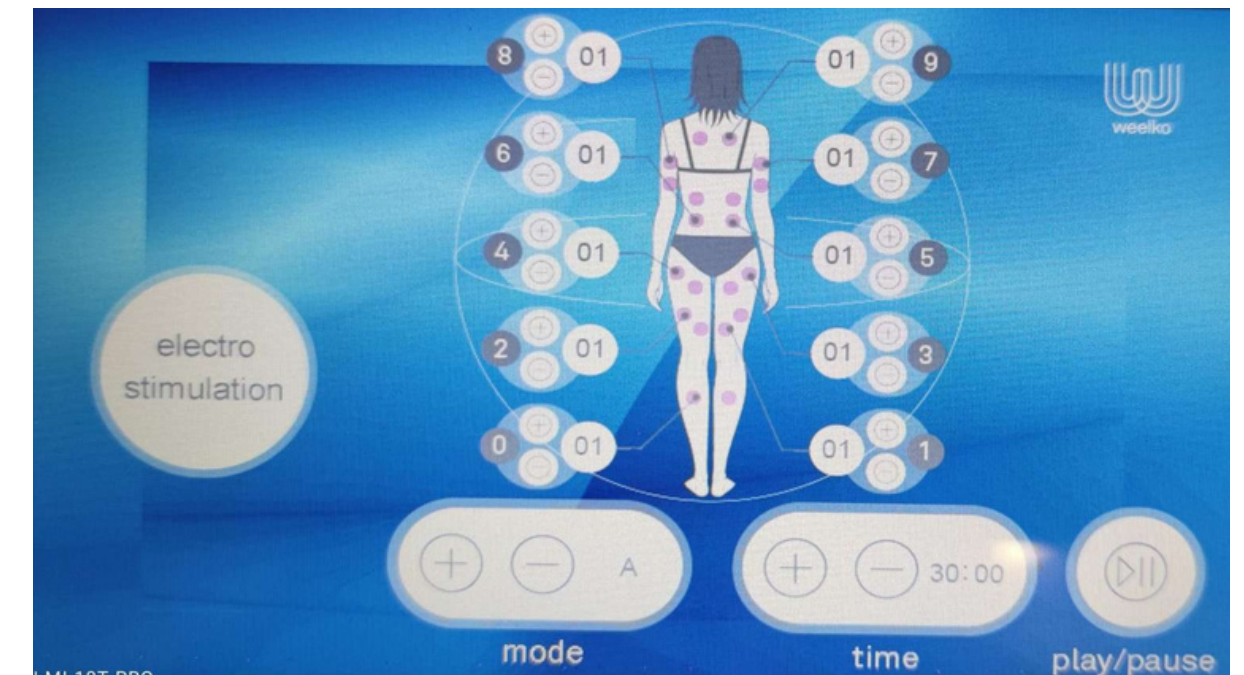

HighTech Combi Fit

WKB008



EMS

La electroestimulación consiste en la utilización de corriente eléctrica para inducir una contracción muscular. Este equipo tiene 10 pares de electrodos de estimulación eléctrica con una onda pulsada, que nos va a proporcionar pulsos eléctricos para trabajar a nivel de estimulación muscular y bioeléctrica, mejorando su función, acelerando el metabolismo de las grasas, trabajando el adelgazamiento y la tonificación muscular.

Al aplicar la electroterapia para fortalecimiento muscular, los electrodos deben posicionarse uno en el punto motor o en el vientre muscular y el otro a en la extensión del músculo, para que la electroestimulación permita al cliente realizar una contracción isométrica fuerte y efectiva, de este modo la corriente viajará entre los dos electrodos de un polo al otro y en dirección de las fibras musculares, para lograr máxima efectividad, de modo que para estimular los músculos superficiales debes colocar los electrodos paralelamente a la dirección de las fibras musculares y para los tejidos profundos debes colocar los electrodos de forma transversal.

Los electrodos deben estar separados entre si unos 5cm, y aplicarse suficiente gel conductor y ajustarlos a la cliente con las bandas elásticas.

En cuanto a la disposición de los electrodos a nivel de abdomen se colocará un par por debajo de las últimas costillas por encima del ombligo y, el segundo par de electrodos o distal por debajo del ombligo a la altura de las crestas iliacas.

Tiempo de tratamiento:

El tiempo debe ajustarse en función a los objetivos deseados y la zona a tratar. Si se busca fortalecimiento muscular, se recomiendan unos 10 a 20min. Para reeducar un músculo, por lo general esto no lleva más de 20 minutos en una sola sesión. En el caso de los tratamientos estéticos de 30 a 45 minutos, de 6 a 8 sesiones, 2 o 3 max. por semana.

HighTech Combi Fit

WKB008



EMS

Este equipo posee 4 modos de trabajo:

Modo A, estimula a la frecuencia de 10Hz, principalmente para tratamientos de flacidez leve, para personas sensibles a la electroestimulación, relajación muscular/anestésico, favorece la circulación, y mejora resistencia aeróbica.

Modo B, estimula a la frecuencia de 20Hz, principalmente para tratamientos de flacidez media, más tolerable en músculos pequeños, mejora resistencia aeróbica muscular y la capacidad oxidativa muscular.

Modo C, estimula a la frecuencia de 30Hz, principalmente para tratamientos de flacidez media, músculos de mayor tamaño, mejora tono, la definición y la firmeza muscular, fortalecimiento y reeducación muscular.

Modo D, estimula a una frecuencia de 40Hz, principalmente para tratamientos de flacidez intensa, contracciones fuertes, mejora capacidad del músculo e incrementa el volumen muscular, fuerza y resistencia, disminución de edema usando el bombeo muscular.

HighTech Combi Fit

WKB008



Indicaciones

- Tratamiento de retención de líquido, edemas y linfedemas.
- Tratamiento de eliminación de grasas y toxinas.
- Tratamiento de piernas cansadas.
- Coadyuvante en tratamientos para la disminución de grasa localizada.
- Tratamientos para mejorar la circulación en pacientes con hipertensión y diabetes.
- Ayuda a mejorar el aspecto de piel de naranja.
- Tratamiento y prevención de signos varicosos.
- Estimulación circulatoria.
- Recuperación de la circulación linfática post operatoria.
- Tonificación muscular
- Oxigenación del organismo.

HighTech Combi Fit

WKB008



Contraindicación de los EMS

- Epilepsia.
- Marcapasos.
- Desórdenes y problemas de circulación.
- Heridas en la piel, eczema o rozadura.
- Diabetes.
- Tromboflebitis y varices.
- No debe realizarse en el área de los ojos, ni a nivel del cuello, ni sobre el corazón.
- Hemorragias recientes, irritación de piel, quemaduras o heridas.
- Alergias e irritaciones de la piel.
- Alteraciones en la sensibilidad o déficit sensitivo.

HighTech Combi Fit

WKB008




Advertencias

- Compruebe con el cliente a lo largo del tratamiento si la sensación es tolerable es la adecuada.
- Se recomienda que el cliente beba mucha agua antes y después del tratamiento.
- No coloque ningún líquido en el equipo.
- Tenga cuidado con las conexiones eléctricas.
- Por favor, desmonte y monte el equipo por personal profesional.
- En caso de malfuncionamiento del aparato compruebe cuidadosamente todas las conexiones y contacte con un servicio técnico en caso de duda.

Yubitzay Avila
Customer Training
T. +34 93 824 9020
y.avila@weelko.com
S. Yubitzay Avila

Weelko Barcelona S. L.
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 93 824 9020
info@weelko.com
www.weelko.com

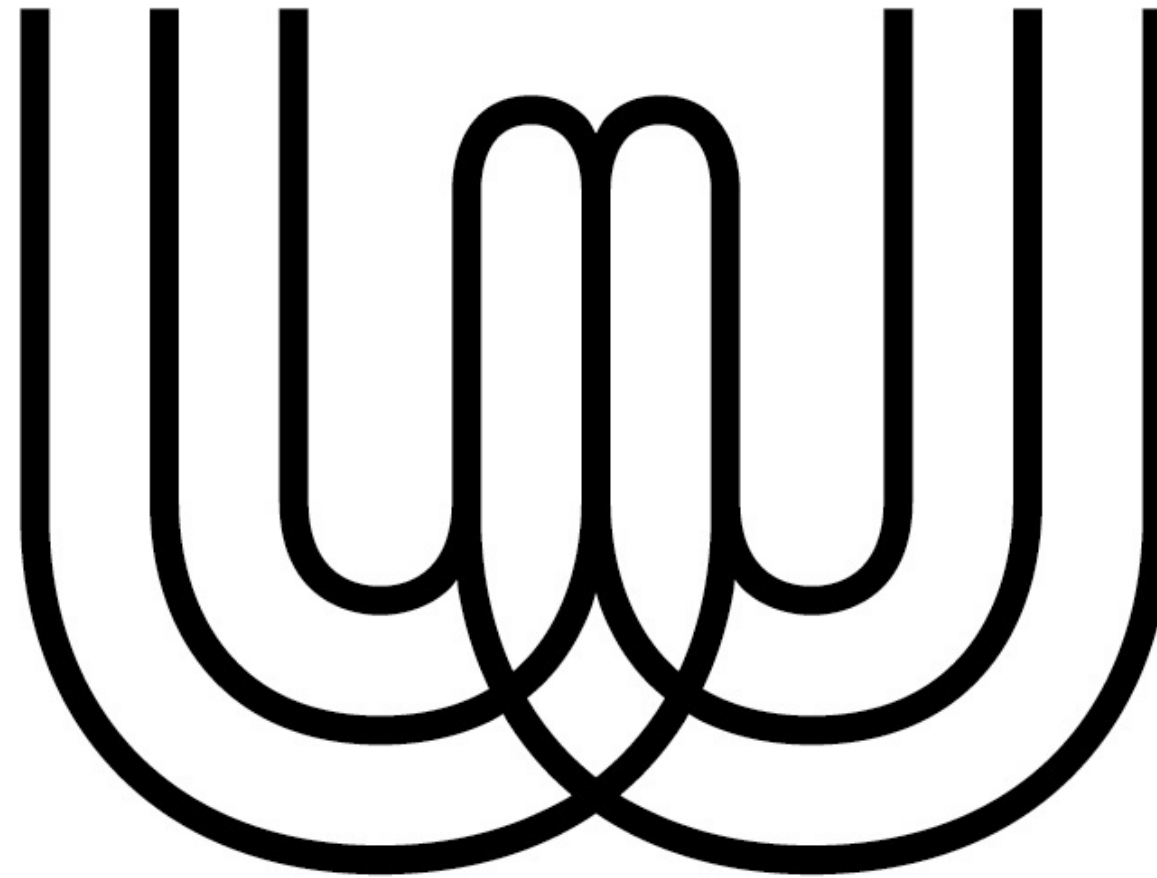

weelko



@weelkobarcelona