



weelko

Welcome to  weelko



# HighTech Sauna Air WKB002

Pressoterapia + Termoterapia

# HighTech Sauna Air WKB002


Pressoterapia + Termoterapia

Nota: Gli apparecchi sono dotati di una pellicola adesiva molto sottile, che protegge lo schermo da eventuali graffi durante l'imballaggio ed è generalmente contrassegnata. Può essere rimossa una volta disimballato.

## APPARECCHIATURA

- Stivale destro e sinistro per pressoterapia.
- Gambale destro e sinistro.
- Fascia addominale.
- Braccio destro e sinistro.
- Coperta, cavi e tubi dell'aria.
- Unità principale.



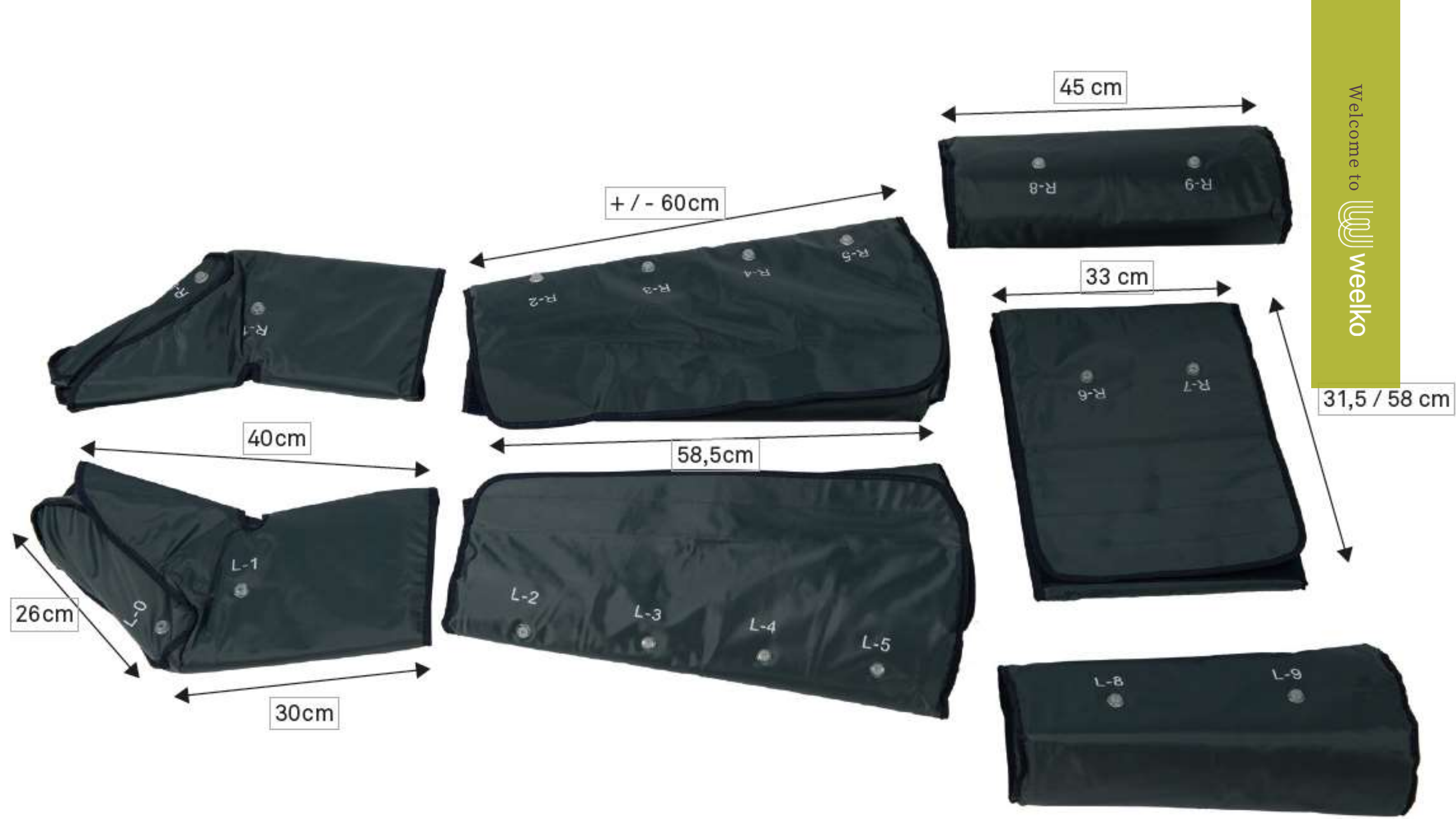

Welcome to  weelko

La nostra WKB002 è un'apparecchiatura digitale di bellezza touch screen che combina 2 funzioni: termoterapia e pressoterapia. La tuta è composta da stivali, gambe, fascia addominale e braccia. Include, inoltre, una coperta per riporre i cavi. Ideale per migliorare la circolazione, favorire l'eliminazione dei grassi attivando il drenaggio linfatico, l'ossigenazione cellulare e il rilassamento muscolare. Sarà il nostro principale alleato nei trattamenti corporali.



## HighTech Sauna Air WKB002

Pressoterapia + Termoterapia

# HighTech Sauna Air

## WKB002

Pressoterapia + Termoterapia

Per collegare correttamente l'apparecchiatura, è necessario farlo sul pannello posteriore, come quanto segue, da sinistra a destra:

- Collegare il cavo di alimentazione o l'alimentatore (200-240V 50Hz).
- Collegare correttamente i tubi sul pannello posteriore. Seguire le indicazioni numeriche. I cavi più sottili dall' 1 al 5 servono per la funzione della termoterapia e i cavi spessi servono per la pressoterapia (3 connessioni).
- Collocare la coperta su una superficie piana in modo che il cliente possa sdraiarsi. Proteggere la coperta con carta usa e getta per garantire condizioni igieniche adeguate.
- Avvolgere le parti della tuta attorno al corpo del paziente e regolarli. Ricordarsi di usare una tuta usa e getta sotto la tuta per pressoterapia e di disinfettare dopo l'uso.





Per accendere l'apparecchiatura troveremo un pulsante sul pannello frontale, quindi faremo clic sul logo Weelko che apparirà sullo schermo per procedere alla selezione dei menu desiderati. Scegliere la funzione "pressotherapy" per la pressoterapia e "far infrared" se si desidera utilizzare la funzione della termoterapia.

# La pressoterapia

È una tecnica non invasiva, non dolorosa che serve come perfetta alleata nei trattamenti estetici in cui si cerca di stimolare il sistema linfatico e circolatorio, trasformandosi in un ottimo complemento in cabina. Il suo sistema di compressione è studiato per aumentare il flusso venoso e linfatico, migliorando il ritorno venoso. Ci aiuta a promuovere le funzioni naturali di depurazione delle tossine del corpo. La rivitalizzazione e l'ossigenazione sono indubbiamente una conseguenza del trattamento con la nostra apparecchiatura, servendo come alleato nel processo di dimagrimento e ridefinizione di gambe, vita e braccia e di miglioramento del tono della pelle. Il numero di sedute può variare da 2 a 3 a settimana, e dipenderà dal tipo di trattamento e dai risultati che si vogliono ottenere, quindi la valutazione preventiva del cliente è di fondamentale importanza. Si tratta di un trattamento sicuro, rilassante e piacevole. La nostra WKB002 è inoltre dotata di Termoterapia, che ne fa un'eccellente combinazione.



Per iniziare sarpa necessario selezionare il tipo di trattamento da eseguire::

**Pressotherapy:** attiva la pressoterapia.

**Far infrared:** attiva la termoterapia.

**Mode:** nella funzione di pressoterapia, il menú “MODE” consente di scegliere uno dei quattro programmi A, B, C, D.

**Level:** regola l'intensità della pressione del trattamento, dosificata in tre livelli: basso, medio, alto. Lavoreremo sempre in base alla tolleranza del cliente, partendo dal livello meno alto al più alto per evitare danni, e verificando che l'intensità durante tutto il trattamento sia adeguata.

**Time:** determina la durata del trattamento, 30-45min. máx. raccomandato.

**Play y Pause:** serve per avviare o mettere in pausa l'apparecchiatura quando ne abbiamo bisogno.



Comprende 4 programmi:

**Modo A**, questo programma gonfia dalla zona 0 alla 9. Sgonfia la zona 0 quando la zona 1 è gonfiata e sgonfia la zona 1 quando la zona 2 è gonfiata, quindi va da un'estremità all'altra, salendo progressivamente dai piedi alle braccia, con un tempo di riempimento per zona di 11sec. e un tempo di riposo di 11 sec., fornendo una piacevole sensazione di morbido drenaggio. Infine gonfia da 0 a 9 contemporaneamente, dopodichè ripete il programma.

**Modo B**, questo programma gonfia dalla zona 0 alla 9. Si sgonfia la zona 0 quando la zona 2 è gonfiata e si sgonfia la zona 1 quando la zona 3 è gonfiata, e quindi sale progressivamente da un lato all'altro, con un tempo di riempimento di 11sec, dopodichè la pressione aumenta per tutto il corpo. Infine gonfia da 0 a 9 contemporaneamente, dopodichè si ripete il programma. La sensazione di pressione è un po 'più intensa e profonda, generalmente utilizzata per trattamenti di cellulite edematosa, ritenzione di grasso o liquidi, edema.






**Modo C**, questo tipo di programma gonfia dalla zona 0 alla 9. Inizia a gonfiare dalla zona 0 e aggiunge la zona 1, seguita dalla 2 e così via, aggiungendo via via zone al processo di gonfiaggio; la pressione dell'aria non si va perdendo contemporaneamente come nelle modalità precedenti, inoltre c'è un tempo di riposo di 11 sec. e infine si ripeterà il programma. Esercita una pressione molto più intensa, concentrata sull'addome e sulle cosce. È consigliato per clienti con cellulite o adiposità localizzata più spesso su cosce e addome.

**Modo D**, Il programma D gonfia tutte e tre le zone contemporaneamente: gambe, addome e braccia dall'estremità verso l'alto. È una modalità molto più intensa, focalizzata sull'addome e sulle braccia. Consigliata per pesantezza addominale e ritenzione di liquidi a livello delle braccia.

Si possono lavorare zone indipendenti senza utilizzare alcun programma, l'apparecchiatura permette di scegliere ogni parte della tuta e di regolare autonomamente il tempo di riempimento d'aria dell'area da trattare. Tutto ciò che c'è da fare è premere il pulsante della zona desiderata e regolarne l'intensità tramite i tasti "+" e "-" di 0 15.

## Modalità di trattamento

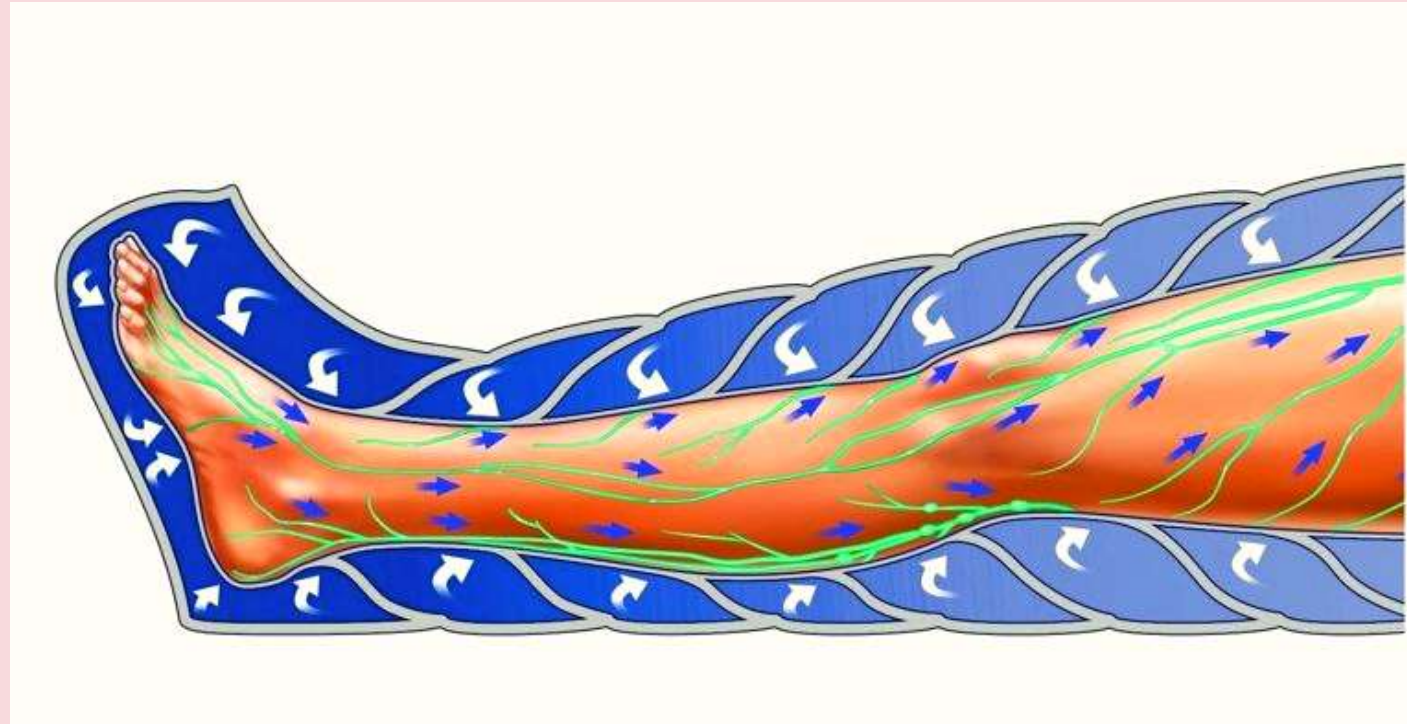

L'applicazione della pressione dell'aria, che stimola il ritorno venoso del sangue al cuore, si traduce in un aumento della circolazione sanguigna e linfatica, oltre ad avere un effetto rilassante e termico prodotto dall'apparecchiatura stessa.

Il cliente deve sdraiarsi supino sul lettino, dopodichè si procederà a posizionare i vari dispositivi e coprire le varie zone, siano esse piedi, gambe, vita o braccia. Questo, secondo il protocollo selezionato, distribuirà la pressione dell'aria, controllata verso l'alto, sulle parti del corpo da trattare.

È importante mantenere attiva la comunicazione con il cliente durante il trattamento per regolarne la pressione ed il tempo.

## La termoterapia

Questa apparecchiatura ci permette anche di avere la funzione di termoterapia, che altro non è che un trattamento corporale che avviene attraverso l'utilizzo del calore. Questo viene utilizzato per attivare la circolazione generale, accelerare il metabolismo dei grassi, produrre sollievo dai dolori muscolari e rilassamento. La temperatura corporea aumenterà come risultato di una temperatura più elevata generata dall'apparecchiatura (la temperatura massima dell'apparecchiatura è di 55 °C), e di conseguenza si otterrà un effetto terapeutico e rilassante. Man mano che il corpo si riscalda, oltre alla sudorazione, aumenta la velocità di circolazione del sangue, accelerando così il metabolismo, mentre il corpo cerca di raffreddarsi. Dispone di 5 zone di trattamento che permettono di regolare la temperatura in maniera indipendente che può essere graduata da 0 a 62.

## Modalità di applicazione



- Collegare correttamente i tubi sul pannello posteriore, è importante seguire le indicazioni numeriche. I cavi sottili da 1 a 5 sono per la funzione di termoterapia, e i cavi spessi da 0 a 9 servono per la pressoterapia.
- È importante posizionare la coperta su una superficie piana in modo che il paziente possa sdraiarsi.
- Proteggere la coperta con carta usa e getta per garantire condizioni igieniche adeguate.
- Avvolgere e regolare gli indumenti attorno al corpo del paziente. Ricordarsi di utilizzare una tuta monouso sotto la tuta per pressoterapia.
- Accendere l'attrezzatura e selezionare il trattamento desiderato, **pressoterapia** o **termoterapia**, e la sua intensità.
- La pressione dell'apparecchio è di 20-40KPa, 25-40L/m.

# Indicazioni



- Trattamento della ritenzione di liquidi, edema e linfedema.
- Trattamento di eliminazione di grassi e tossine.
- Trattamento per gambe stanche.
- Coadiuvante nei trattamenti per la riduzione delle adiposità localizzate.
- Trattamento per migliorare la circolazione nei pazienti con ipertensione e diabete.
- Aiuta a migliorare l'aspetto della buccia d'arancia.
- Trattamento e prevenzione dei segni varicosi.
- Stimolazione circolatoria.
- Recupero della circolazione linfatica post-operatoria.
- Tonificazione muscolare.
- Ossigenazione del corpo.

# Contraindicazioni

Essendo un trattamento molto controllato, ci sono poche controindicazioni, tuttavia è importante consultare un professionista medico-estetico prima di realizzarlo.

- Gravi problemi cardiovascolari.
- Flebite.
- Malattie infettive.
- Malattie della pelle e possibili infezioni attive.
- Malattie immunodeficienti o pazienti oncologici.
- Problemi ormonali.
- Nelle donne in gravidanza si possono trattare solo gambe e braccia, con pressione atmosferica molto bassa e sempre su prescrizione medica.
- Non può essere utilizzato in persone con epilessia, pacemaker o qualsiasi grave condizione psicologica o medica.
- Non è raccomandato l'uso in persone con problemi di claustrofobia.



# Avvertenze

- È importante fare attenzione a non stringere troppo la tuta al corpo del paziente, per evitare di ferirlo se la pressione dell'aria è molto forte; la regolazione della pressione sarà sempre regolata entro la tolleranza del paziente.
- Se la tuta è strappata o invecchiata, sostituirla con una nuova.
- Verificare con il paziente durante tutto il trattamento che la pressione dell'aria sia adeguata.
- Si raccomanda al cliente di bere molta acqua prima e dopo il trattamento.
- Utilizzare una protezione in cellulosa sotto la tuta per pressoterapia per garantire condizioni igieniche adeguate.
- Non mettere alcun liquido nell'apparecchio.
- Si prega di far smontare o montare l'apparecchiatura da personale professionale.
- In caso di malfunzionamento del dispositivo, controllare attentamente tutti i collegamenti e in caso di dubbi contattare un servizio tecnico.

**Yubitzay Avila**

**Customer Training**

T. +34 93 824 9020

y.avila@weelko.com

S. Yubitzay Avila

**Weelko Barcelona S. L.**

Pol. Ind. La Valldan

Camí de Garreta, 92


08600 Berga

Barcelona – Spain

T. +34 93 824 9020

info@weelko.com

www.weelko.com

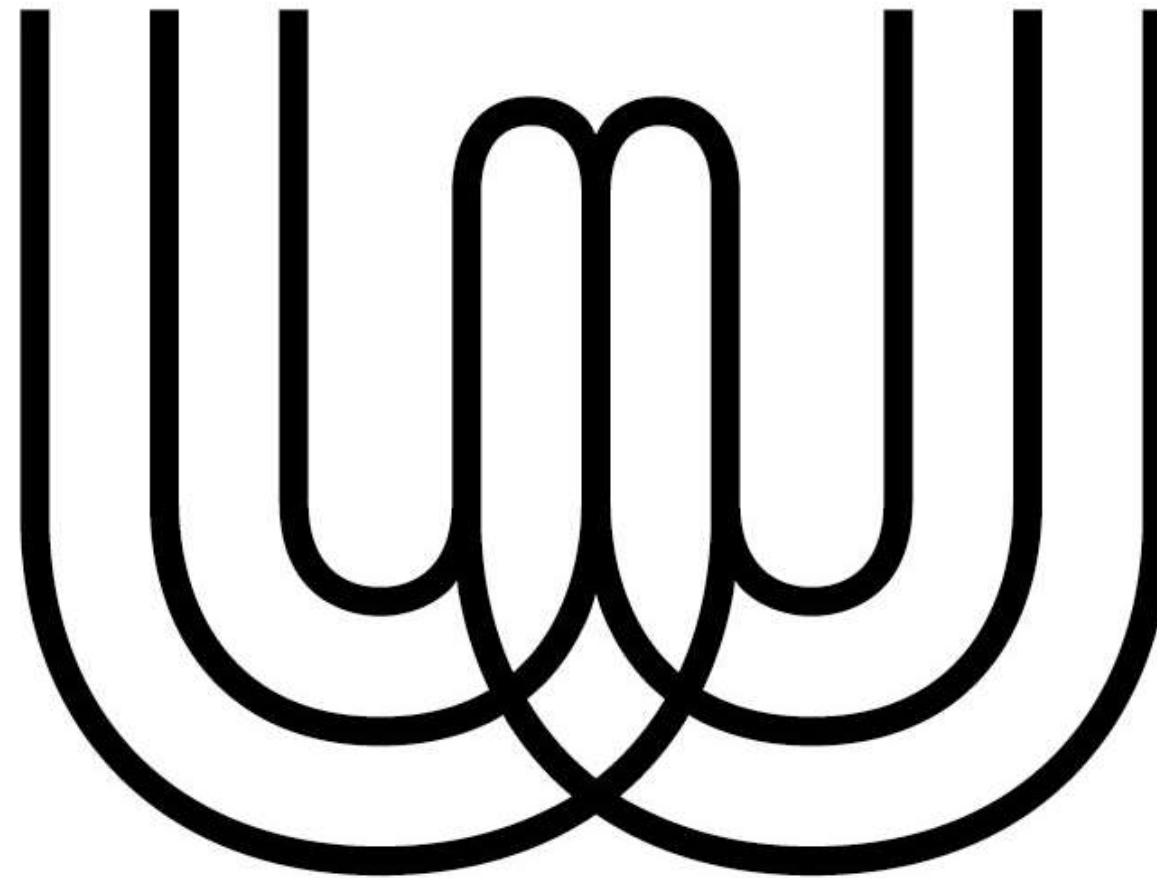

**weelko**



Welcome to  weelko