

## INDICE

Vibromassaggio e sessioni	2
Apparechiatura e testine	3
Velocità e caratteristiche tecniche	4
Informazione web	5

## Vibromassaggio con **U-Tech** di Weelko

Cellulite? **Pelle d'arancia**? Smagliature? **Cattiva circolazione**? Dolori osteoarticolari? **Problemi di transito intestinale**? Problemi linfatici? **Edema**? Sovrapeso? **Ritenzione di liquidi**? Menopausa? Flaccidità? **Stanchezza**? Stress?

### Rilassati con un massaggio **U-Tech**, **F-833**

Strumento di massaggio vibratorio corporale dotato di 5 applicatori per diversi trattamenti. Unità digitae che si trova nella colonna con base e ruote e un vassoio dove ubicare le testine.

Il nostro ZOOM TECNICO ti mostra tutti i dettagli, tutte le funzioni e ti dà la possibilità di conoscere le nostre apparecchiature.

L'apparecchiatura di massaggio vibratorio, sotto la lente di Weelko. Scoprilo sfogliando all'interno.



## Il Vibromassaggio

### A proposito del massaggio vibratorio

Il vibroterapia è una tecnica avanzata per trattare attivamente la pelle e i muscoli. Funziona grazie a un dispositivo che genera pressione tramite una testina rotatoria e vibratoria. Le vibrazioni meccaniche si utilizzano in modo terapeutico sulle diverse parti del corpo.

### In cosa consiste?

L'apparecchiatura con la testina adattabile genera delle vibrazioni a bassa frequenza che, a loro volta, producono un'onda meccanica. Quest'onda si propaga con più o meno profondità negli strati cutanei a seconda della frequenza utilizzata. Più la frequenza è bassa più profondamente agisce nella pelle. A frequenze alte (fino a 40) agisce più superficialmente. Funziona per mezzo di una testina scillante dove si adattano le differenti applicatori per i vari trattamenti.

### Quali sono i benefici?

- Stimola la proliferazione cellulare
- Elimina le imperfezioni cutanee
- Stimola la circolazione locale
- Rassoda la pelle
- Contribuisce a una più veloce rigenerazione della pelle
- Migliora l'ossigenazione e la nutrizione cellulare
- Rimuove le tossine e dà maggior luminosità alla pelle
- Migliora il drenaggio linfatico
- Conferisce una sensazione di benessere e relax
- Mobilita e diminuisce il grasso immagazzinato
- Modella il corpo

### Per cosa è indicato?

- Cellulite e pelle d'arancia
- Stanchezza alle gambe
- Ritenzione idrica
- Dimagrimento e trattamenti rassodanti
- Ossa e dolori articolari
- Stress e fatica
- Problemi linfatici
- Problemi muscolari
- Terapia antistress
- Massaggio linfodrenante
- Tonificazione muscolare
- Ginnastica passiva nei muscoli paralizzati
- Trattamenti complementari alla fisioterapia

### Controindicazioni

- Persone con problemi cardiaci
- Persone con pacemaker
- Malattie infettive e infiammatorie in fase acuta
- Fratture ossee
- Ferite aperte
- Gravidanza
- Donne incinte nella zona addominale
- Tumori
- Problemi di pressione sanguigna alta e/o bassa
- Vene varicose, tromboflebite o trombosi
- Diabete
- Epilessia
- Eczemi, psoriasi

## Trattamento

Il tempo raccomandato per una sessione varia da 30 a 60 minuti, a seconda del tipo di trattamento. Non esistono disposizioni specifiche per quanto riguarda un massaggio rilassante. Il professionista dovrà programmare ogni trattamento e gli intervalli tra le sessioni secondo i bisogni del paziente.

## Apparechiatura e applicatori



Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4



Fig 5

**Applicatore 1:** Applicatore circolare con punte grandi per un massaggio profondo. Utilizzare a velocità basse, tra i livelli 1 e 2. A massima velocità (livello 5) è utilizzato anche per la stimolazione a livello dell'epidermide.

**Applicatore 2:** Applicatore circolare con multipli punte sottili di silicone. Lavora a livello dell'epidermide. Stimolazione, esfoliazione, massaggio e vasodilatazione tonificante. Utilizzato per schiena, glutei e cosce. Usare a velocità 5. Preparare la pelle per facilitare la penetrazione di creme riduttrici od oli corporali. Utilizzato per trattamenti sportivi prima dell'esercizio grazie alla sua azione iperemica generata localmente con il massaggio (livelli 4 e 5).

**Applicatore 3:** Applicatore circolare di spugna, soffice e versatile. Per le parti sensibili del corpo. Massaggio leggero e delicato. Utilizzate prima e dopo i trattamenti per preparare i tessuti e togliere le contratture. Velocità tra 3 e 5. Utilizzare una fodera di tessuto di fibra o di carta monouso per coprire la testina durante l'uso.

**Applicatore 4:** Applicatore quadrata da 4 emisfer. Massaggio sulle spalle, schiena, glutei e cosce. Velocità 1, 2 e 3.

**Applicatore 5:** Applicatore di spugna a forma di V, appropriata per lavorare su spalle, collo, schiena, cervicali, gambe e ginocchia. Molto adatto per rilassamento e per combattere lo stress quotidiano. Utilizzare una fodera di fibra o di carta monouso per coprire la testina durante l'uso. Usare a velocità 2, 3 e 4.

### Velocità di rotazione

Il dispositivo è dotato di 5 posizioni per regolare la velocità/frequenza. Più bassa è la frequenza, più profondamente agiscono le onde meccaniche. Le basse velocità sono raccomandate per la stimolazione del muscolo e dell'ipoderma. Le frequenze più alte agiscono sull'epidermide.


**Velocità 1 (minima):** la testina rotatoria ha una frequenza di vibrazione di approssimativamente 13 Hz. Agisce nel muscolo in profondità.

**Velocità 2:** la testina rotatoria ha una frequenza di vibrazione di approssimativamente 17 Hz. Agisce intorno al muscolo e nell'ipoderma (lo strato più profondo della pelle).

**Velocità 3:** la testina rotatoria ha una frequenza di vibrazione di approssimativamente 22 Hz. Agisce sul derma (su tutti gli strati della pelle).

**Velocità 4:** la testina rotatoria ha una frequenza di vibrazione di approssimativamente 28 Hz. Agisce sul derma (su tutti gli strati della pelle).

**Velocità 5 (massima):** la testina rotatoria ha una frequenza di vibrazione di approssimativamente 40 Hz. Agisce sull'epidermide (sullo strato più esterno della pelle)

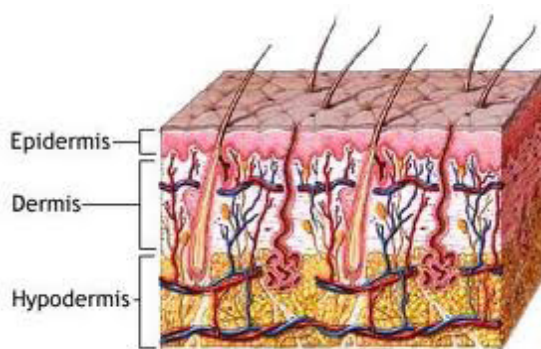

**Epiderme:** strato esterno della pelle. È composto da 4 substrati, denominati dal più esterno al più interno: strato corneo, traslucido, granuloso, spinoso e basale o germinativo. In questo strato si trovano le cellule morte.

**Derma:** strato intermedio, responsabile della resistenza e della flessibilità della pelle. Nel derma si trovano le fibre di collagene e di elastina e l'insieme neurovascolare.

**Ipoderma:** strato più profondo della pelle. Tessuto adiposo.

### Caratteristiche Tecniche

Misure e pesi	Misure imballaggio (cm)	83,5 x 42,5 x 39,5
	Misure apparecchiatura (cm)	41 x 17/24 x 13
	Peso lordo (kg)	15
	Peso netto (kg)	18,6
Frequenza	Frequenza vibrazione	fino a 40 Hz
Caratteristiche tecniche	Tensione	220V—240V
	Frequenza	50 Hz/60Hz

### Recambi

No.	PRODOTTO	REFERENZA
1	Testina massaggio profondo	40025-5
2	Testina esfoliazione	40025-4
3	Testina di spugna	40025-1
4	Testina da 4 emisferi	40025-2
5	Testina a forma di V	40025-3
6	Set completo di applicatori	40025
7	Testina oscillante	50064-1
8	Tubo flessibile	50064



Visita il nostro TECHNICAL INFO e scarica tutta la informazione tecnica di cui potresti aver bisogno. Fotografie, dossiers, schede tecniche, ecc. Non te lo perdere.

Dossiers | Technical Zoom



**TheWellness Company**

**Guía para tratamientos de Belleza**

**Contenidos:**

- Ultrasonidos 3
- Estimulo 3
- Alta Frecuencia 3
- RF 3
- Brasero 3
- Peeling ultrasonido 4
- Microdermoabrasión 5
- Microdermoabrasión con diamante 5
- Microdermoabrasión 5
- Praxantropia 6
- Saco masaje 6
- Conector de masaje 6
- Manejo corporal 6
- Manejo de masaje 6
- Radiofrecuencia 8
- Conducción de calor 8
- Conducción de calor conductiva y sin UPTIND 11
- Electroestimulación 12
- Vaporizadores 14
- Enterradores 14
- Recambios 14

**Tratamientos estéticos con la aparatología profesional Weelko**

Weelko es un concepto nuevo que trasciende los productos de bienestar. Es una actitud y una forma de entender el mundo en una escala global, una manera de cuidar a los más pequeños detalles con el fin de atender a las personas. Para aquellos que disfrutan de nuestro equipo y mobiliario se sienten cómodas en el más amplio sentido de la palabra.

Con este objetivo, desarrollamos líneas específicas para las áreas de Belleza y Podología. Todos ellos diseñados para garantizar el máximo bienestar a los profesionales y sus pacientes sin olvidar la distribución que confían en la calidad de nuestro servicio. Desde Europa y el resto de sus fronteras.

Algunas ajustables, métodos múltiples de uso, líneas ergonómicas, texturas agradables, aspectos de mantenimiento mínimo, instrucciones fáciles de entender y montajes sencillos son, entre otras, los factores que hacen los productos Weelko prácticos, funcionales y, sobre todo, cómodos. Se prioriza lo esencial.

La superficie se deja de lado. Productos tecnológicamente avanzados diseñados para trabajar de una manera más agradable. Cuanto más fácil, mejor.

**Welcome to Weelko, the wellness company that makes it easy. Come in, feel good and relax.**

**TheWellness Company**

**Dossier de podologie**

**One step ahead**

**Contenidos:**

- QUIRO 2244A 3-3
- 2244C 3-3
- TARSE 2249A 4-3
- A2248C 4-3
- NAVI 2237A 5-6
- MEDAL 8-9
- EXTENS 2239C 10
- 2239A 10
- SOL 2231A 11
- ALX + ERGO + OPCIONES 12
- ARTICULO 13

Weelko es un nuevo concepto que va más allá de los productos de bienestar. Es una actitud y una forma de entender el mundo a nivel global. De cuidar los detalles para cuidar a las personas. De conseguir que quienes disfrutan de nuestros equipos y mobiliario se sientan cómodos en el sentido más amplio de la palabra.

Con este objetivo desarrollamos líneas específicas para Belleza y Podología. Todos ellos pensados para garantizar el máximo bienestar a los profesionales y a sus pacientes, sin olvidar a los especialistas en distribución que confían en la calidad de nuestro servicio. Desde Europa hacia todo el mundo.

Algunas regulables, formas de uso intuitivas, líneas ergonómicas, texturas agradables, espacios de almacenamiento mínimos, instrucciones fáciles de entender, montajes simples... son muchos los factores que contribuyen a que los productos Weelko sean prácticos, funcionales y, por encima de todo, cómodos. Con todo lo necesario y sin nada superfluo. Tecnología avanzada, materiales innovadores, diseñados para trabajar de una forma más agradable. Más fácil. Mejor.

Cuidar la salud de las personas implica técnicas específicas y productos a medida. Con el asesoramiento de expertos en podología, Weelko ha desarrollado una línea de muebles que ofrece una protección completa, con reguladores abatibles y zona de piernas independientes. Se trata de aliviar totalmente cualquier molestia que los profesionales trabajan a gusto y los pacientes se sientan bien.

**Welcome to Weelko, the wellness company that makes it easy. Come in, feel good and relax**

**TheWellness Company**

**Technical Zoom**

**Esthétique**

**ma 2014**

**TABLE**

Pressothérapie et bilancés	2
Accessoires	4
Praxantropie, applications techniques et pilotes d'attache	5
Information web	6

**Pressothérapie avec U-Tech de Weelko**

Cellulite? Mauvaise circulation sanguine? Enflures localisées? Problèmes articulaires? Consultez votre praticien pour plus d'informations. Retrouvez la liste des produits et des services disponibles sur le site [www.weelko.com](http://www.weelko.com).

**Attinez votre silhouette avec U-Tech, F-826**

L'équipe de pressothérapie formée par une unité de contrôle digital assure ainsi l'efficacité de votre traitement par des bilancés, ouverture et manœuvre pour les bras.

Notre TECHNICAL ZOOM vous montre tous les détails, tous les particularités et vous offre la possibilité de commander à tout moment votre matériel.

La pressothérapie, à la Weelko. Découvrez-la à l'impression.

weelko.com

Barcelona  
Pol. Ind. La Valldan  
Camí de Garreta, 92  
08600 Berga  
Barcelona – Spain  
T. +34 93 824 90 20  
E. [info@weelko.com](mailto:info@weelko.com)